# AB02083- New Dolphin

Presentazione design concept




#### **Descrizione Generale**

Il sistema laparoscopico Dolphin è uno strumento utilizzato durante la chirurgia laparoscopica per fornire fluidi di irrigazione sterili (lavaggio) e/o per produrre aspirazione per evacuare fluidi, sangue e piccoli detriti di tessuto e mantenere una visione chiara del sito chirurgico.

Il sistema è composto da un manipolo di controllo pre-collegato a un set di tubi e da una cannula rimovibile.



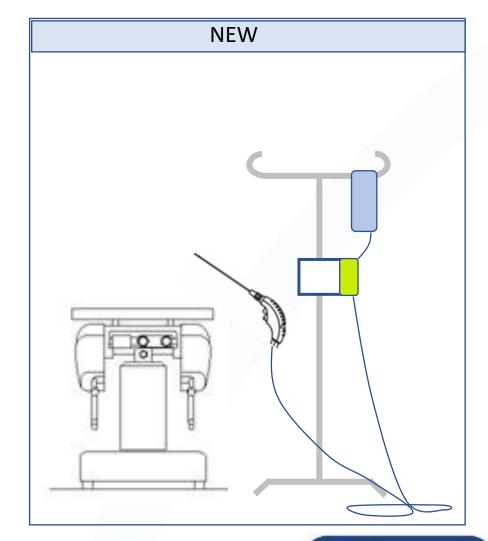






#### Concept

#### confidential


Il concept del prodotto è stato sviluppato intervenendo sugli elementi di miglioramento dell'attuale Dolphin e introducendo alcune IDEE FORTI che ne hanno guidato lo sviluppo formale e meccanico

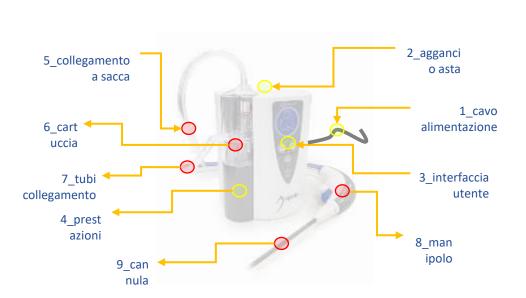

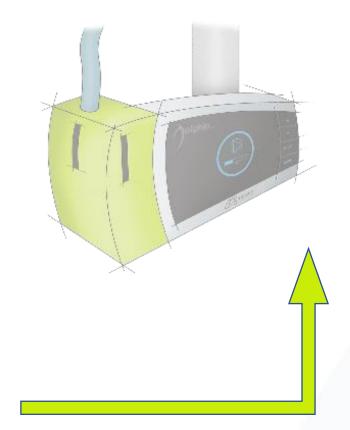

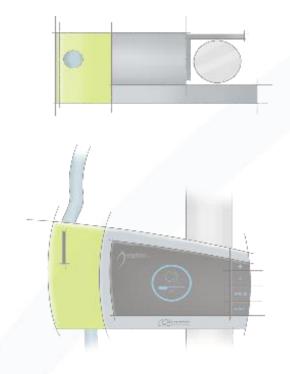



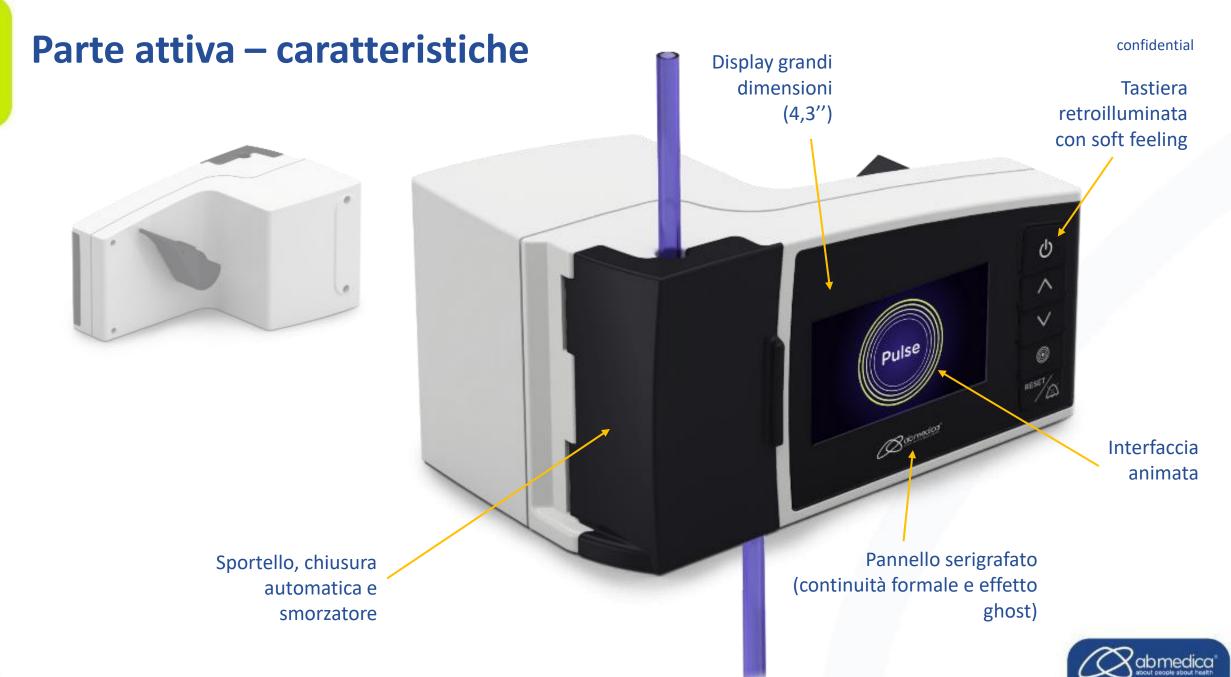

#### Parte attiva – render




Sistema di aggancio rapido ad asta (adattabile a diversi diametri)



#### confidential


### **Layout parte attiva**

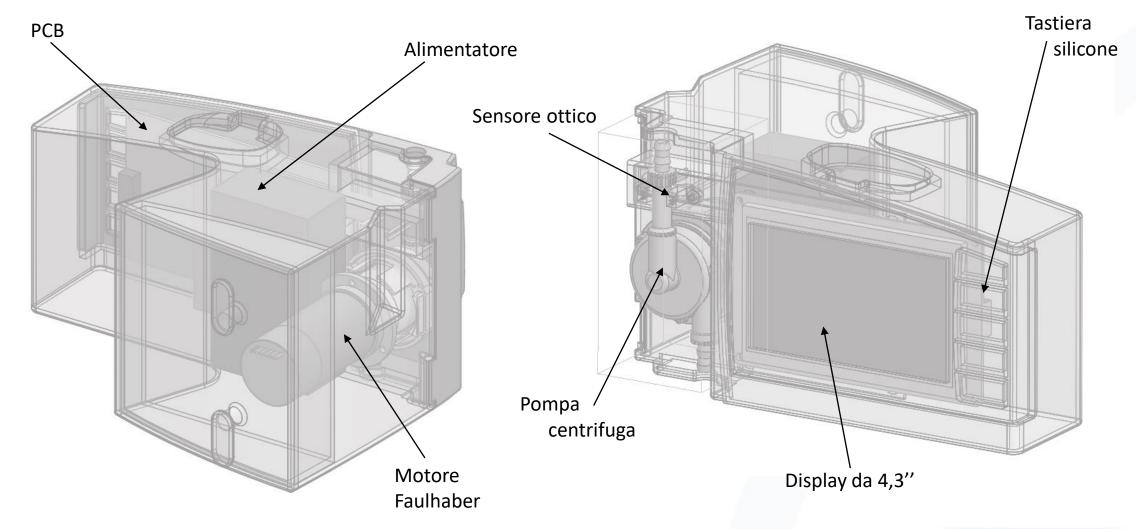





#### confidential

### **Layout parte Monouso - Cartuccia**

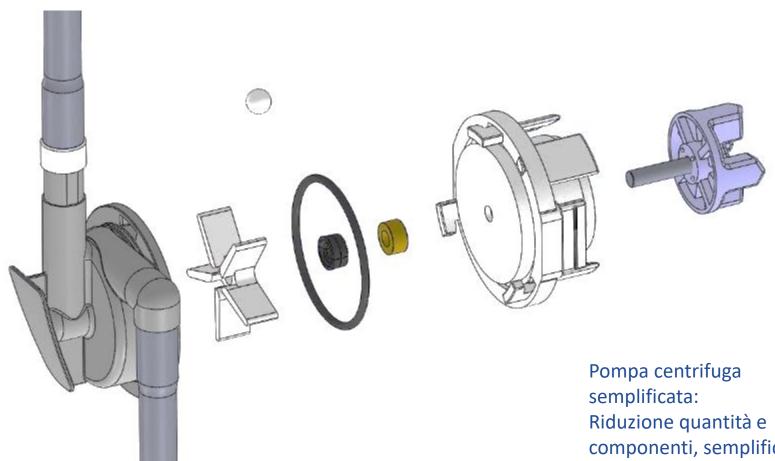


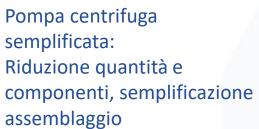

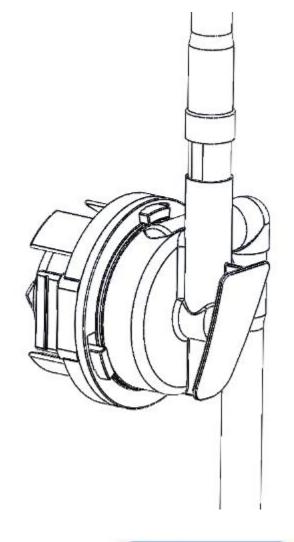





### **Layout parte monouso - Manipolo**

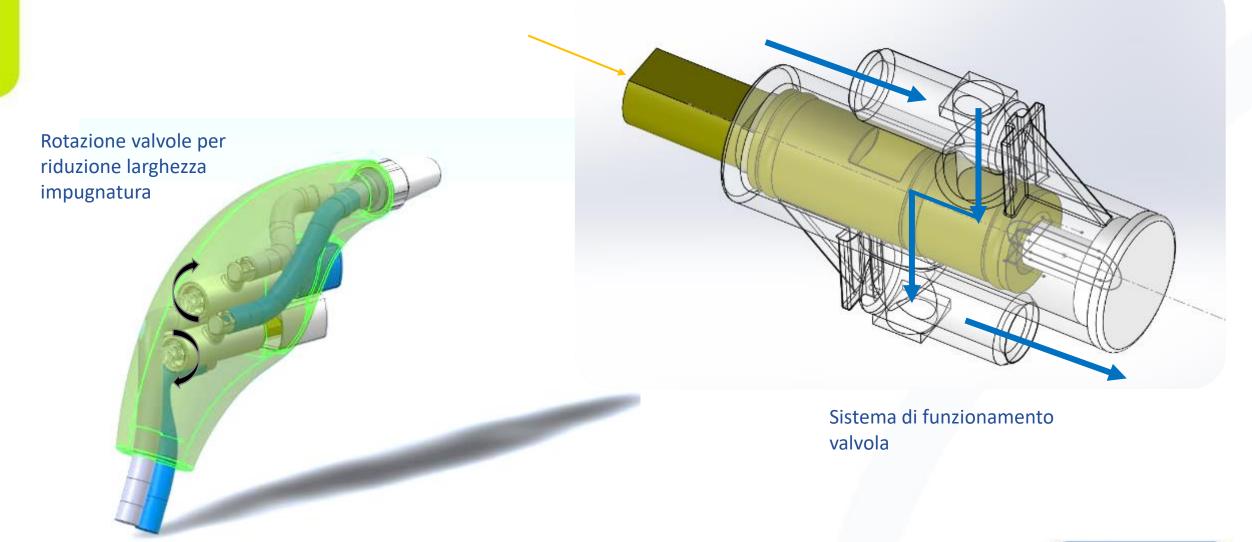



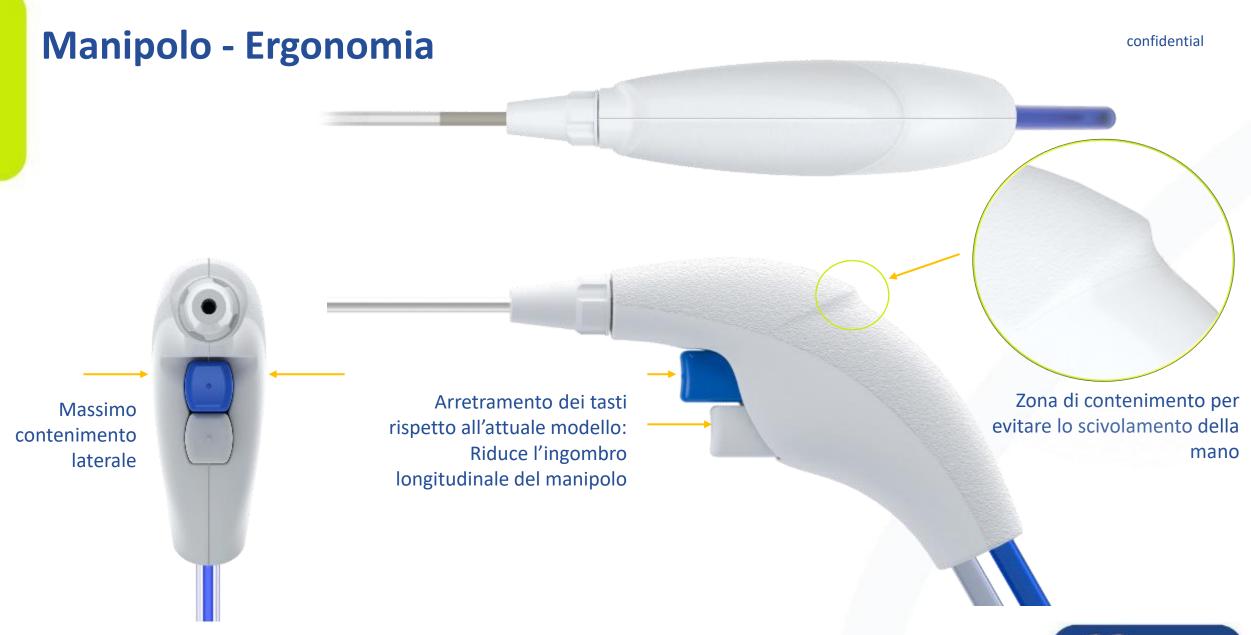




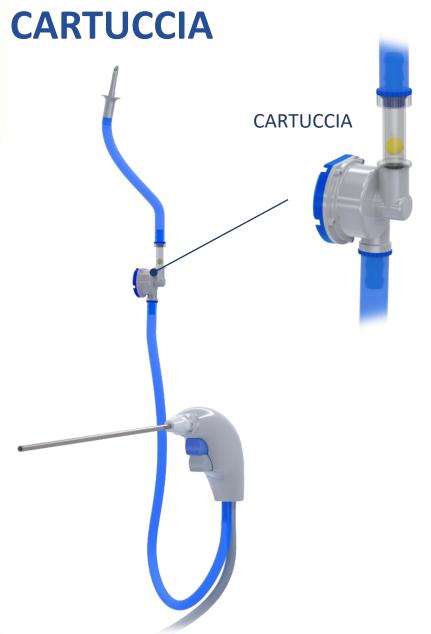

- (4) Per risolvere il problema dell'innesco abbiamo pensato di:
  - Cambiare la forma del galleggiante (sfera anziché prisma)
  - Sensore Infrarosso più affidabile (da riflessivo a trasmissivo)
  - Mantenere il motore al minimo durante la fase di stand-by. Questo accorgimento non renderà più necessaria un'altezza minima tra tavolo operatorio e pompa.

confidential

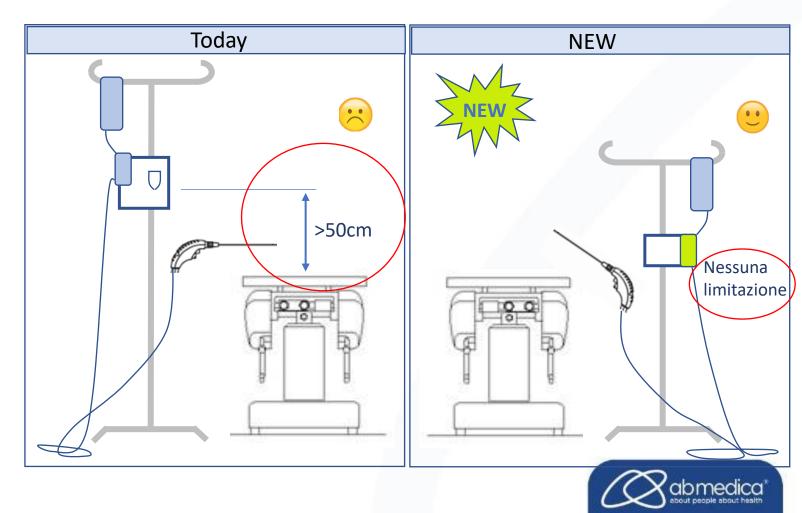



## Grazie per l'attenzione